

# Affidabilità

## ETOILE



### BLUE ENERGY

Radiofrequenza e massaggio a vuoto rimato vacuum con un unico manipolo per trattamenti di ringiovanimento veloci e più efficaci.

**Blue Energy: qualità italiana affidabile e sicura.**

*Combined instrument for lifting and skin rejuvenation*

# BLUE ENERGY

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Caratteristiche tecniche generali:

Tensione di alimentazione dei circuiti secondari: 15 V  
Contatore dei minuti di trattamento  
Alimentazione: 230V 50-60 Hz  
Dimensioni: 65x36x19 cm  
Peso: 13 kg.  
Potenza totale assorbita: 180 VA  
9 Livelli selezionabili di regolazione uscita  
Visualizzazione su display grafico monocromatico 125x70 mm  
Controllo a microprocessore  
Dotazione per il trattamento combinato: 2 applicatori di dimensione diversa ciascuno capace di effettuare entrambi i trattamenti

### Caratteristiche tecniche Radiofrequenza:


Frequenza di lavoro: 1,5 Mhz  
Protezione da sovraccarico  
Completo isolamento elettrico tra l'apparecchiatura ed il soggetto trattato  
Massima potenza assorbita dall'amplificatore finale di radiofrequenza: 80 W  
Dotazione: 3 applicatori per zone ridotte e per zone grandi, con accoppiamento capacitivo ad alta impedenza (senza quindi alcuna necessità di elettrodo di ritorno)

### Caratteristiche tecniche Vacuum:

Misura e indicazione continua del livello di vuoto  
Dotazione: set di coppette di aspirazione e set di cannule per comedoni

**Apparecchio realizzato nel rispetto delle norme vigenti.**

Blue Energy è un'apparecchiatura completa che è stata specificamente studiata per effettuare trattamenti combinati sfruttando due sistemi ampiamente conosciuti: la radiofrequenza e il massaggio endodermico attuato con azione di vuoto ritmato (Vacuum). È stata progettata per combattere l'invecchiamento cutaneo, soprattutto del viso, e come valido ausilio per la rivascolarizzazione di certe zone del corpo in cui un'insufficiente circolazione sanguigna, associata all'avanzare dell'età e all'esposizione solare, ha provocato la formazione di inestetismi di vario tipo (rughe, cicatrici, smagliature...). I due sistemi possono essere usati in sinergia o singolarmente e, a tal fine, Blue Energy è dotata di applicatori specifici per poter effettuare i trattamenti in entrambe le modalità. Il trattamento combinato in particolare, effettuato con un unico manipolo, permette di dimezzare i tempi di lavoro con grande vantaggio per l'operatore. La radiofrequenza consente di inviare energia avvertibile sotto forma di calore, là dove è specificamente richiesto con benefici sulla circolazione locale e una conseguente migliore irrorazione delle cellule del derma. Il massaggio endodermico, attuato con azione di vuoto ritmato ad intensità e cadenze regolabili, consente di effettuare un'utile azione di scollamento. I benefici maggiori sulla circolazione sanguigna sono ottenibili attraverso l'utilizzo dei due sistemi in sinergia.

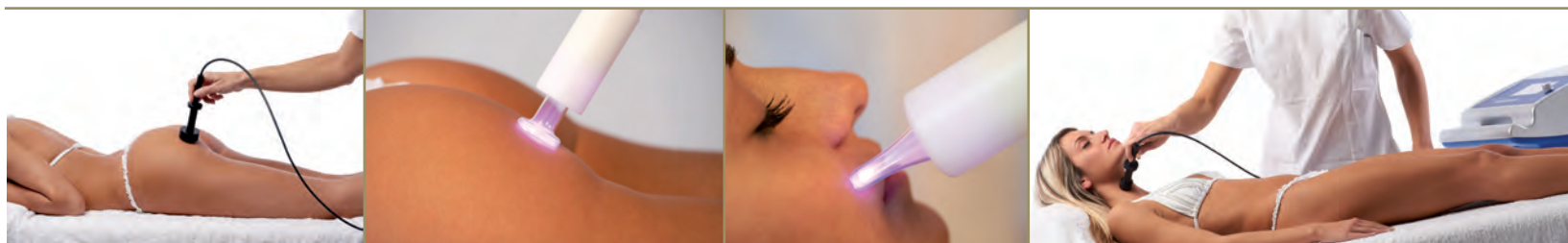

## TECHNICAL FEATURES

### General Technical features:

Secondary circuit electrical tension: 15V  
Digital totalizer timer  
Supply voltage: 230V 50-60Hz  
Dimensions: 65x36x19 cm  
Weight: 13 kg.  
Total absorbed power: 180 VA  
9 Selectionable levels  
Visualization by monochromatic graphic display 125x70 mm  
Control by microprocessor  
Equipment for combined treatment: 2 applicators with different size, each for both treatments

### Radiofrequency technical features:

Working frequency: 1,5 Mhz  
Overload protection  
Total electrical insulation between the device and the patient  
Maximum absorbed power by radio-frequency amplifier: 80 W  
Equipment: 3 applicators each for small and large areas, characterized by capacitive coupling with high impedance (then without need of return electrode)

### Vacuum technical features:

Continuous measurement and indication of vacuum level  
Equipment: set of cupping glasses for suction and set of cannulas for comedones

Blue Energy is a complete device which has been specifically studied in order to effect combined treatments by using two systems widely known: radiofrequency and endermology massage performed with a pulsed vacuum action. This device has been planned in order to fight against skin ageing, especially of the face, and as valid help for revascularization of certain areas of the body where, because of a a blood circulation stasis with association to advanced age and exposure to the sun, there has been a slight blemishes formation (wrinkles, scars, stretch marks...). The two systems can be used in sinergy or individually and, to this end, Blue Energy is provided with specific applicators in order to effect the treatments in both ways. Particularly the combined treatment, effected with only one handpiece, allows to halve the working times with big advantage for the operator. Radiofrequency allows to send energy by generating internal heat where it is specifically required with advantage on local blood circulation and a subsequent better derma cells irroration. Best advantages on blood circulation is obtainable by coupling the two systems in sinergy. Endermology massage, performed with a pulsed vacuum action, allows to effect a useful detaching action.

**ETOILE**

**Etoile - Sede Legale e Operativa:**

Via Grandi, 9 - 20060 Mediglia Fraz. Robbiano (MI)  
Tel. 02 90660460 - 02 90663899 - Fax 02 90660498  
Stabilimento: Via Di Vittorio, 33/14 20068 - Peschiera Borromeo (MI)  
e-mail: info@etoileonline.it - www.etoileonline.it

DA TRENT'ANNI COSTRUTTORI  
DI APPARECCHIATURE AFFIDABILI E SICURE