

VIVAC

ETOILE

vibration vacuum &



VIVAC

Applicazioni: adiposità localizzate
e inestetismi causati dalla cellulite

Applications: localized fat and
signs caused by cellulite

VIVAC. qualità italiana affidabile e sicura



DATI TECNICI:

- Alimentazione: 230 Vca 50-60 Hz
- Potenza massima assorbita: 150 W
- Ampiezza vibrazione: 5 mm
- Frequenza vibrazione: da 40 a 55 Hz in dipendenza da regolazioni intensità vibrazione e vuoto
- Intensità vibrazione: regolabile da 1 a 10
- Diametro applicatore vibrazione: 30 mm
- Intensità vacuum: da 0,05 a 0,5 Bar regolabile
- Visualizzazione parametri: Display LCD 125x70 mm
- Manipoli: 1 combinato per massaggio endodermico, 1 combinato vibrazione-vacuum
- Peso: 10 kg
- Dimensioni: 65x36x19 cm

Applicazioni: adiposità localizzate e inestetismi causati dalla cellulite

VIVAC

vibration & vacuum

Applications: localized fat and signs caused by cellulite

TECHNICAL FEATURES:

- Supply voltage: 230 Vca 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 150 W
- Dimensions: 94x40x33 cm
- Vibration amplitude: 5 mm
- Vibration frequency: from 40 to 55 Hz depending on intensity settings of vibration and vacuum
- Vibration intensity: adjustable from 1 to 10
- Vibration applicator diameter: 30 mm
- Parameter view: LCD display 125x70 mm
- Handpieces: 1 combined for endodermal massage, 1 combined vibration-vacuum
- Weight: 10 kg
- Dimensions: 65x36x19 cm

COME FUNZIONA


- Fase 1:** 4 secondi - applicazione vacuum
- Fase 2:** 4 secondi - applicazione vacuum + vibrazione
- Fase 3:** 1 secondo - rilascio vuoto e vibrazione (permette eventuale spostamento del manipolo).

Nella fase 1, avvengono le tipiche azioni e i noti effetti del vacuum (come il richiamo di sangue).

Nella fase 2, oltre alle azioni dovute all'applicazione del vuoto, avvengono:

- energico massaggio meccanico (pressione e depressione) localizzato con stimolazione e miglioramento delle funzioni vascolari (zona A)
- azioni di trazione e "stiramento" localizzato e intenso sul tessuto epidermico (zone B), con effetti analoghi a quelli ottenibili con la strizione mediante rulli motorizzati (tipo LPG).

SEZIONE SCHEMATICA | SCHEMATIC SECTION
(B) AZIONE DI TRAZIONE | ACTION OF TRACTION
(A) AZIONE DI COMPRESSIONE-DECOMPRESSIONE | ACTION OF PRESSURE-DEPRESSURE

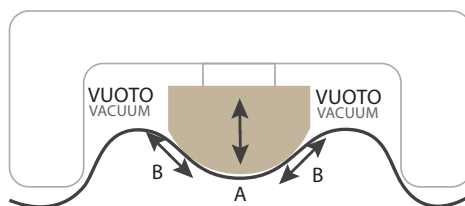

HOW IT WORKS

- Step 1:** 4 seconds: Vacuum
- Step 2:** 4 seconds: Vivac (Vibration + Vacuum)
- Step 3:** 1 second: Release of Vacuum and Vibration to allow movement of handpiece.

During step 1, application of vacuum allows recall of blood in the treated zone.

During step 2, in addition to the application of vacuum, we can note:

- an energetic mechanical massage (pressure-depression) localized with stimulation and improvement of vascular functions (Zone A)
- actions of traction and localized and intensive lengthening on the epidermic tissue (Zone B).

ETOILE

DA TRENT'ANNI COSTRUTTORI DI APPARECCHIATURE AFFIDABILI E SICURE

P.A.E. Produzione Apparecchi per Estetica s.r.l

Via G. Di Vittorio, 33/14 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Tel. 02 55305406 - Fax 02 55306182
P.I.: 05525770961 | info@etoileonline.it | www.etoileonline.it